

Beknopte Startgids

Lightwriter SL50

Art.nr 1740400



ABILIA

MAAK KENNIS MET UW LIGHTWRITER



De Lightwriter SL50 is een snelle, eenvoudige manier om te communiceren.

De Lightwriter wordt mogelijk geleverd met beschermende folie op de schermen. U moet de folie verwijderen voordat u de Lightwriter gebruikt.



DE INHOUD VAN DE DOOS

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn wanneer u de doos opent:



Set afdekrasters



Gereedschapset



Oplader

Ethernetkabel



Gebruikstas



Gebruikershandleiding
& Beknopte startgids



Geheugenstick



Reservetoetsen




Lightwriter SL50

DE BATTERIJ LADEN

Sluit de oplader aan voordat u uw Lightwriter gebruikt. U kunt de Lightwriter gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.

U dient uw Lightwriter **12 uur** aan de lader te laten voordat de batterij volledig is opgeladen. Daarna dient u de batterij **regelmatig 3-4 uur** op te laden waarna het apparaat een hele dag gebruikt kan worden. Dit kunt u het beste 's nachts doen.

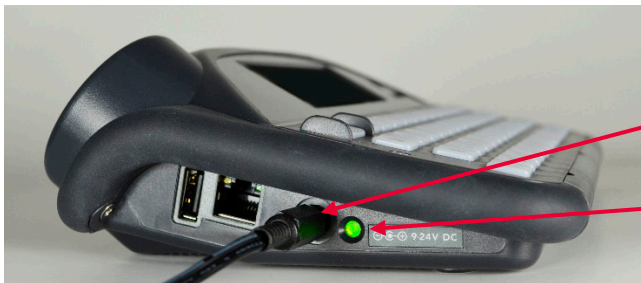

Opladaansluiting

Oplaadlampje

UW LIGHTWRITER AANZETTEN

Druk op de **Aan-Uitknop**  om uw Lightwriter aan te zetten.

Het kost de Lightwriter enkele momenten om voor het eerst op te starten.


Als u de Lightwriter gedurende korte tijd niet gebruikt of niet op een toets drukt, gaat het scherm uit en staat het apparaat in de **Standbymodus**.

Druk op een willekeurige toets om het apparaat te activeren, waarna u verder kunt gaan waar u mee bezig was.


Druk op **Shift**  en dan op de **Aan-Uitknop**  om uw Lightwriter uit te zetten.

BEGINNEN MET SPREKEN


Wanneer u de Lightwriter aanzet, ziet u als eerste het scherm **Sprek**.

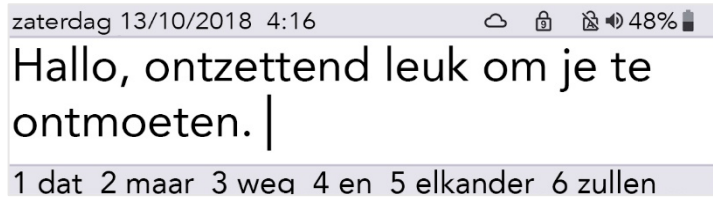



U gebruikt uw Lightwriter-toetsenbord net als een gewoon toetsenbord voor het typen van woorden en zinnen. Wanneer u typt, ziet u dat er onder het gebruikersscherm een rij met woordvoorspellingen verschijnt.

Druk op **Enter**  en de Lightwriter spreekt de woorden die u getypt hebt, hardop uit. Ook verschijnen de woorden op het **Meeleesscher**.

Terwijl u typt, verschijnen er voorspellingen onder in het scherm. Druk op de betreffende **cijfer-toets** om een woordvoorspelling te gebruiken. Dit werkt alleen als **Num Lock** uit staat.

Gebruik **Shift**  om de rode symbolen op de toetsen te typen.

DE FUNCTIE VAN DE TOETSEN

	Aan-Uitknop		Symbol
	Enter		Valuta (drukt u op Shift + 3)
	Menu		Cijfers
	Num Lock		Pijltoetsen naar Links en Rechts
	Shift		
	Delete		Letter- en Spatietoetsen
	Vergrendelen (Alarm)		
			
			Geluiden


UW LIGHTWRITER INSTELLEN

Met een klein aantal instellingen kunt u uw Lightwriter aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.





MENU'S GEBRUIKEN

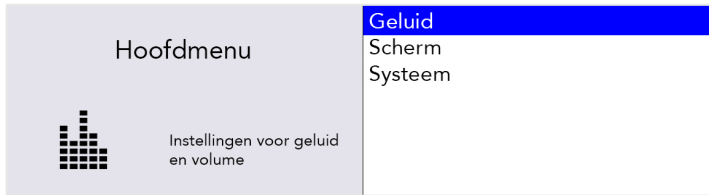

Druk op **Menu** voor toegang tot de eenvoudige instellingen in het **Gebruikersmenu**.



Tip – Door op **Shift-Menu** te drukken, verkrijgt u toegang tot de **Geavanceerde Menu-opties**.

Gebruik de **Pijltoetsen naar Links**  en **Rechts**  om door de opties te bladeren. In een menu drukt u op **Enter**  om een optie te selecteren of op de **Aan-Uitknop**  om te annuleren.

UW BASISINSTELLINGEN OPSLAAN

Stem – Ga naar **Shift-Menu** > **Stem** > **Selecteer Stem**. Hier vindt u een aantal mannen- en vrouwenstemmen waaruit u kunt kiezen. Druk op **Enter** om uw stem te bevestigen.




Spraakvolume – Ga naar **Menu** > **Geluid** > **Mixer** > **Spraakvolume**. Kies een volumeniveau van 0-10 en druk op **Enter** om te bevestigen.

Druktoetsvolume – Ga naar **Menu** > **Geluid** > **Mixer** > **Toets indrukken**. Kies een volumeniveau van 0-10 en druk op **Enter** om te bevestigen.

Datum en Tijd – De datum en tijd moeten automatisch voor u worden ingesteld. Als u ze toch moet veranderen, gaat u naar **Shift-Menu** > **Datum en Tijd**.

Scansnelheid – Gaat u naar **Shift-Menu** > **Bezig met scannen** > **Scansnelheid**. Hier kunt u instellen op welke snelheid de toetsen worden gescand.

Scangeluid – Hier kunt u instellen welk geluid de toetsen maken wanneer ze worden gescand. **Shift-Menu** > **Bezig met scannen** > **Scangeluid**.

Tip – U kunt het **hoofdvolume** snel aanpassen door op de toetsen  **ente** drukken  

UW SOFTWARE BIJWERKEN

Het is van belang dat de software op uw Lightwriter actueel is, zodat het apparaat goed en veilig werkt. Updates kunnen belangrijke bugfixes, beveiligingsupgrades en verbeterde functies bevatten.

U kunt een internetverbinding gebruiken om uw software op elk gewenst moment bij te werken. Sluit daarvoor eenvoudigweg een ethernet-kabel aan op uw Lightwriter en op uw router.



Een wolfpictogram geeft aan dat u nieuwe updates downloadt. Na voltooiing wordt op het scherm aangegeven dat u het apparaat moet herstarten. Daarna is de update volledig voltooid.

(ALLEEN SCANNEN) DE SCHAKELAARS AANSLUITEN

Sluit de twee schakelaars op **poort 1** en **2** aan.


















Tip – U kunt ook met één schakelaar scannen of u gebruikt een willekeurige toets van het toetsenbord (in de gebruikershandleiding staat meer informatie).

Druk op de schakelaar in **poort 2** om de gemarkeerde rijen of toetsen te doorlopen. Gebruik de schakelaar in **poort 1** om de gemarkeerde rij te selecteren en nogmaals om de gemarkeerde toets te selecteren.

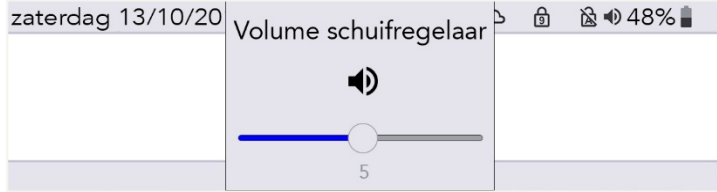Druk op een **willekeurige toets** om terug te keren naar de gewone toetsenbordinvoer.

SNELTOETSEN EN TIPS

UIT	Druk op Shift  en dan op de Aan-Uitknop 
AAN	Druk op de Aan-Uitknop 
STANDBY (slaapstand)	Houd de Aan-uitknop  2 seconden ingedrukt. U kunt op een willekeurige toets drukken om het apparaat weer te activeren.
MENU ITEM SELECTEREN	Druk op Enter 
SCHERM VERLATEN	Druk op de Aan-Uitknop 
TEKST ANNULEREN	Wanneer u tekst typt, kunt u met de Aan-Uitknop  de hele tekstregel wissen.
VOLUME	Houd de Geluiden-toets  ingedrukt terwijl u op de Pijltoets naar Links  of Rechts  drukt, om het volume harder of zachter te zetten. 
DEMPEN	Druk op de Geluiden-toets  om uw Lightwriter te dempen, zelfs in het midden van een zin. Druk opnieuw op Geluiden  om het dempen ongedaan te maken.
HERSTARTEN FORCEREN	Als u een herstart moet forceren, houdt u de Aan-Uitknop  10 seconden ingedrukt totdat het scherm uitgaat en knipperend weer aan gaat.
ALARM*	Houd de Vergrendeltoets  ingedrukt tot het alarm klinkt.

* Moet worden geactiveerd in de Instellingen.

Meer informatie over uw Lightwriter is te vinden in de gebruikershandleiding.

+46 8 594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com

1740400_SL50QuickGuide_NL_RevB